

VYGON

Value Life

با نام خدا و آرزوی یک دنیا سلامتی

محصولات دسترسی عروقی

▶ اهمیت دسترسی وریدی در نوزادان

▶ اندیکاسیون های مهم در تعبیه PICC


▶ معرفی مراکز درمانی موفق در تعبیه

▶ اندیکاسیونهای مهم در تعبیه لیدرفلکس

▶ تصاویر تعبیه کتتر و عدم تعبیه



اهمیت دسترسی وریدی در نوزادان

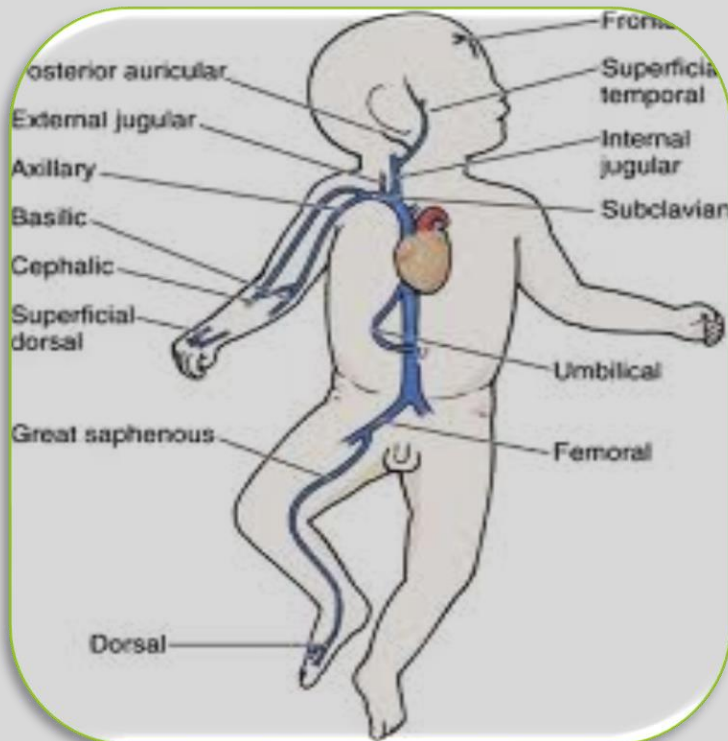


- ▶ تغذیه تام وریدی
- ▶ آنتی بیوتیک درمانی
- ▶ کم بودن وریدهای در دست
- ▶ درد و استرس

VYGON

Value Life

PICC(Peripherally inserted central catheter)

Premicath

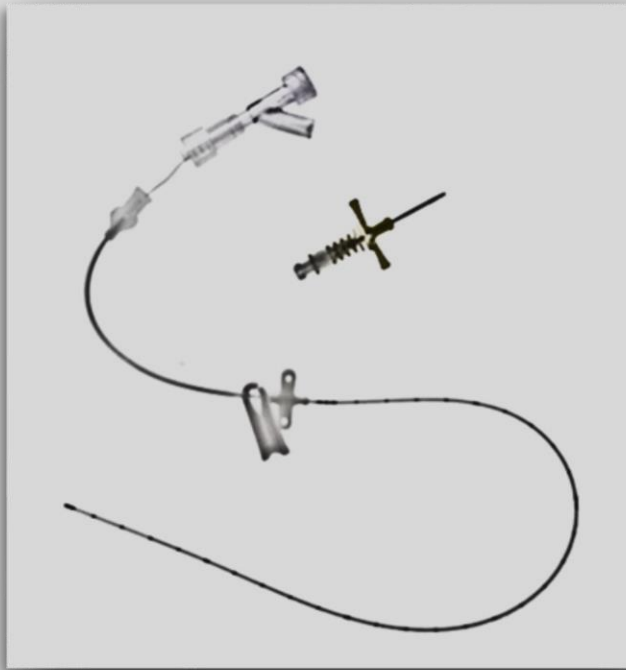

ویژگی و مزیت ها :

▶ کاتترپلی اورتان

▶ کاتتر مدرج

▶ کلمپ(گیره)

▶ کاتتر رادیواوپیک


▶ اینترودیوسر

VYGON

Value Life

PICC Nutraline

Prmicat h	Fr 1	G 28	♦, ۲۲mm
nutraline	Fr 2	G 24	0.65 mm

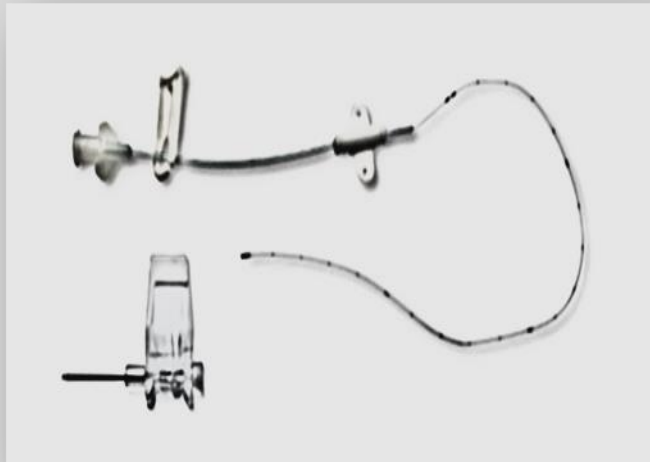

▶ ویژگی ها و مزیتها :

▶ کنتریپلی اورتان

▶ اینتردیوسر

▶ وجود اکتنشن تیوپ


اندیکاسیون استفاده از PICC

- ▶ نوزادان نارس خصوصا نوزادان با وزن تولد کمتر از ۱۵۰۰ گرم
- ▶ نوزادانی که نیازه درمان وریدی بیش از ۶ روزدارند
- ▶ آنومالی اندام ها(تعداد وریدهای در دسترس کمتر میشود
- ▶ نیازه تزریق مواد هایپراسمولار، اسیدی، بازی و یا حاوی مواد محرک عروق

کاتتر نافی

Umbilical Vein Catheter

FR	Flow Rate
3.5	6
4	16
5	31

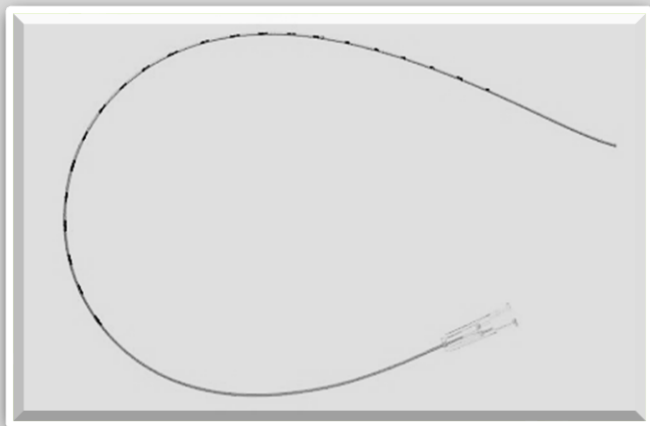

ویژگی های محصول :

کانکتور لوئرلاک

کاتتر رادیواوپیک

کاتتر مدرج

کاتتر با سر بلانت

کتر نافی Umbilical Vein Catheter

چرا کتر نافی ؟ ▶

▶ دسترسی سریع و آسان به ورید ناف.

▶ بدون درد در مقایسه با روش از راه پوست.

▶ ویدهای محیطی نوزاد را حفظ میکند.

▶ مناسب برای درمان کوتاه مدت.


موارد استفاده : ▶

▶ کتر شریان نافی

▶ کترورید نافی

leaderflex

6 cm	22 G	14 Fl
8 cm	22 G	12 Fl

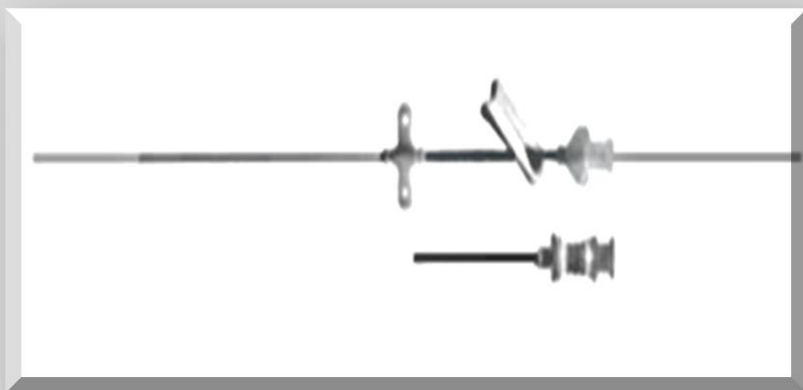

- ▶ ویژگی ها و مزیت ها :
- ▶ کاتتر رادیواوپیک
- ▶ کاتتر پلی اورتان
- ▶ سوزن اینترودیوسر
- ▶ گاید وایر سر صاف (Blunt)
- ▶ کاتتر با هاب بالدار

leaderflex

دستورالعمل کتتر گذاری

- ▶ گاید وایر کمتر از دو سانت وارد رگ شود.
- ▶ گاید وایراز همان جهتی که در پکیج است وارد شود(سربلانت).
- ▶ کاتتر را از قسمت نزدیک به نوک آن نگاه دارید.
- ▶ کاتتر را در نقطه ورود با حرکات چرخشی ملایم هدایت شود.

موارد استفاده

- ▶ کتترگذاری شریانی
- ▶ کتترگذاری ورید مرکزی درکودکان
- ▶ کتترگذاری وریدمحیطی Midline



Value Life

فيلم تعبيه ليدر فلکس



2527845310416414624.MP4



Value Life

تصاویر تعبیه موفق و عدم استفاده از کتتر






Value Life

اکسسوری ها

بایونکتور ▶



اختاپوس ▶

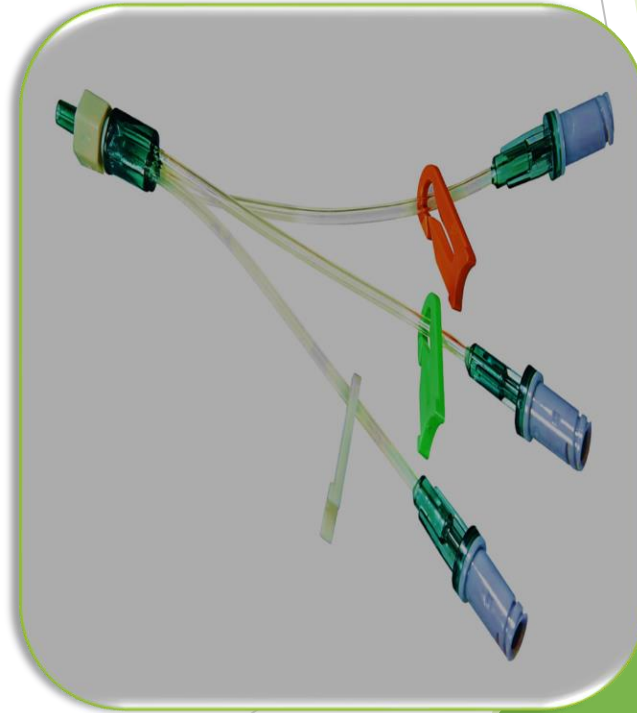



تشکر فراوان از توجه شما